


Armário Hospitalar Safe Clip

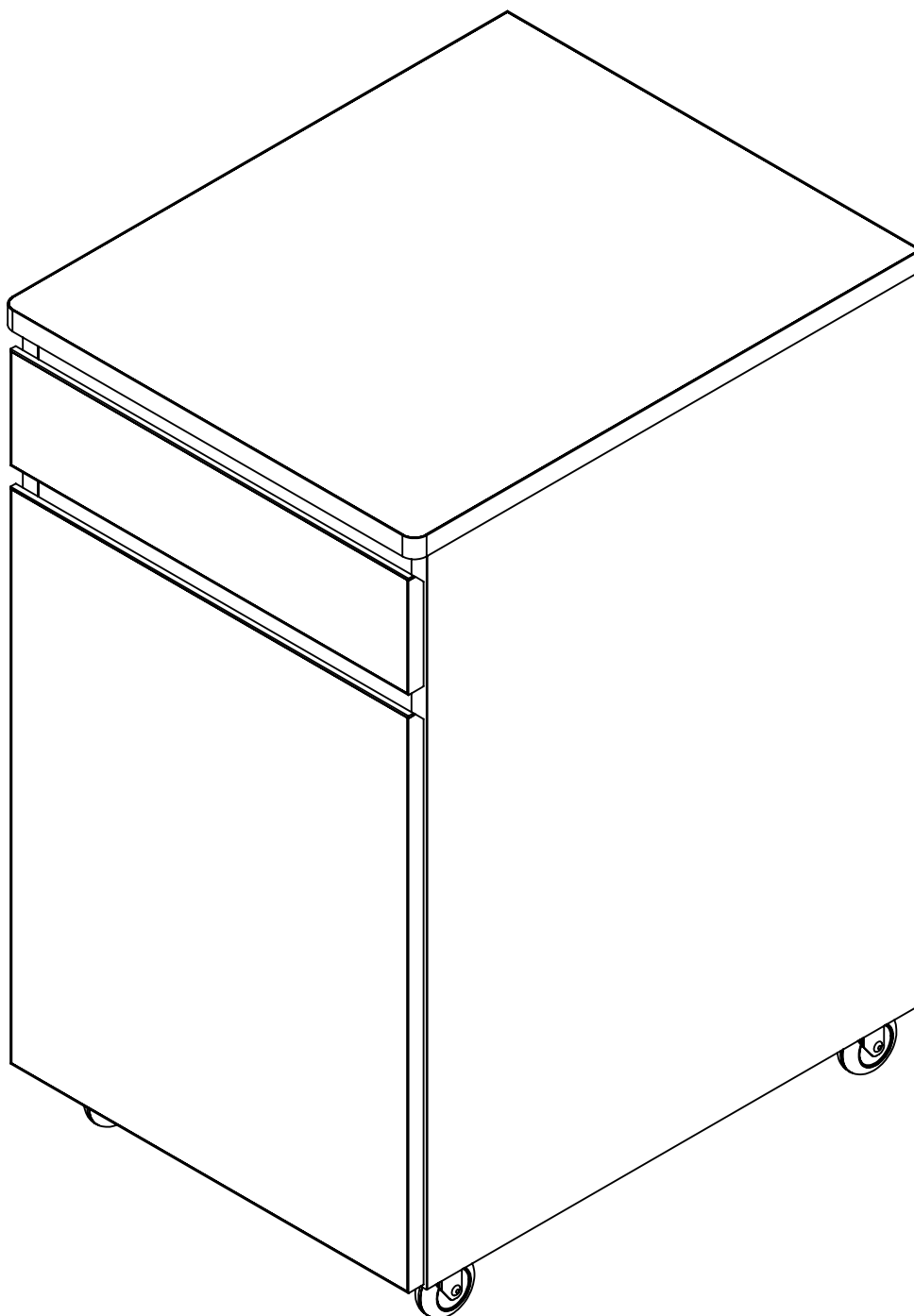

FERRAMENTAS RECOMENDADAS

Atenção:



Ferramentas necessárias para a montagem, não inclusas e não fornecidas com o produto.

Chaves de fenda simples e philips, trena, martelo e parafusadeira com ponteira philips



Rev: R00 - Data: 04/09/2025

Armário Hospitalar Safe Clip

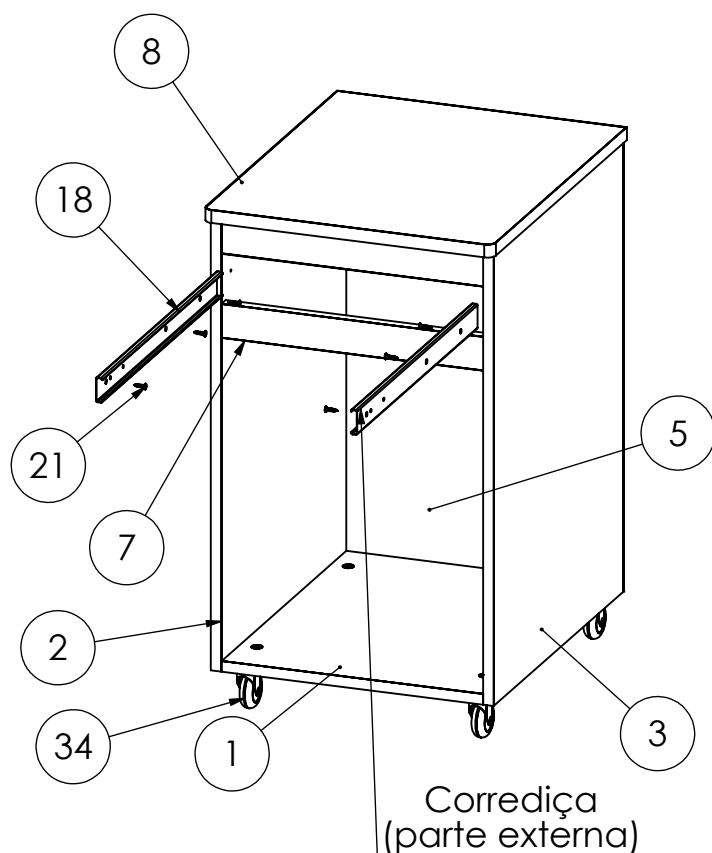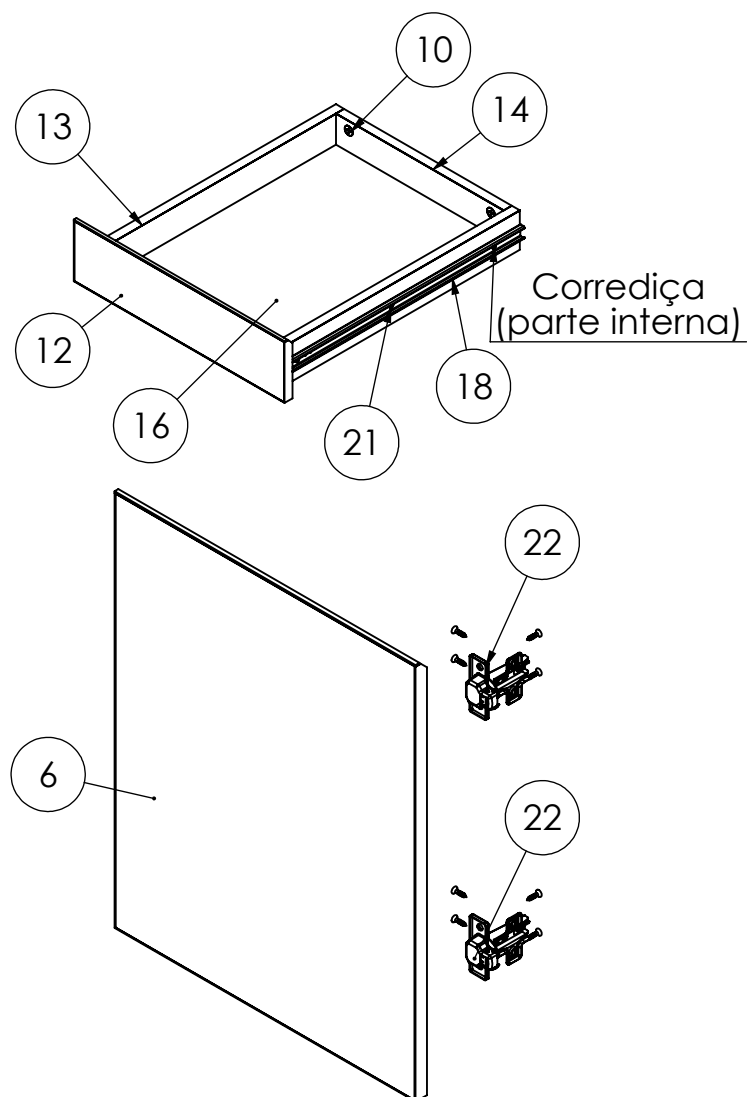

Item	Descrição	Qtd	Dimensão
1	Base Inferior	1	485x370x15
2	Lateral esquerda Armario	1	485x634x15
3	Lateral Direita Armário	1	485x634x15
4	Travessa Superior Traseira	1	80x370x15
5	Fundo Armário	1	617x381x6
6	Porta	1	495x394x15
7	Travessa Frontal	2	370x48x15
8	Superior Tampo	1	410x500x18
9	Cavilha	22	Ø6X30
10	Tambor Minifix	18	-
11	Parafuso Minifix	18	-


Item	Descrição	Qtd	Dimensão
12	Frente Gaveta	1	394x100x15
13	Lateral Esquerda Gaveta	1	450x64x15
14	Traseira Gaveta	1	314x64x15
15	Frente Interna Gaveta	1	314x64x15
16	Fundo Gaveta	1	326x432x6
17	Lateral Direita Gaveta	1	450x64x15
18	Corrediça	2	35x450
20	Parafuso Chipboard	4	Ø4,0x25
21	Parafuso Chipboard	28	Ø4,0x16
22	Dobradiça	2	-
34	Rodízios	4	-

Rev: R00 - Data: 04/09/2025

Armário Hospitalar Safe Clip

1º Passo

Fixar os Rodízios (34), na Base (1), com os parafusos 4,00 x 16mm (21).

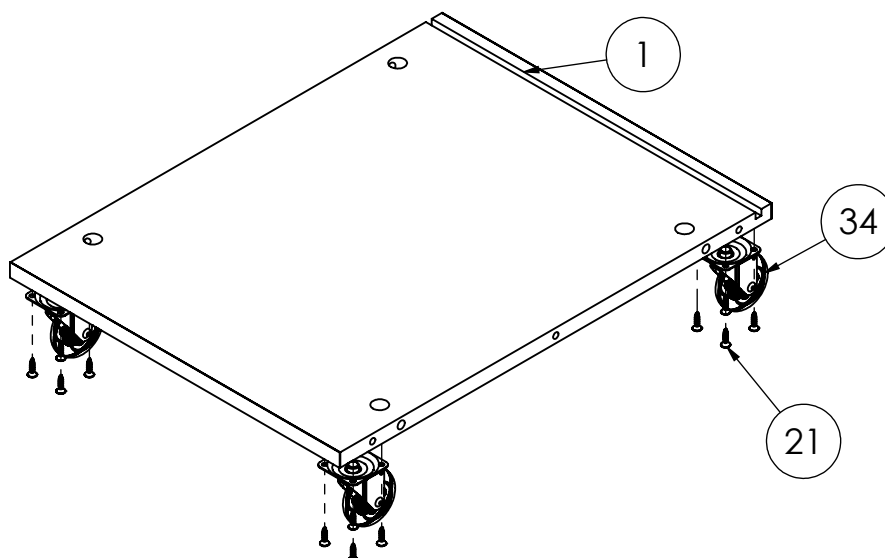

Montagem da Base

2º Passo

Fixar na Chapa Lateral (13) e (17) os 04 parafusos minifix (11).


Fixar nas Chapas (14) e (15) 02 cavilhas (9), e 02 tambores minifix (10)

Fixar Chapa (15) na Chapa (12) com os 04 Parafusos Chipborad 4x25mm (20).

Fixar 02 corredeiras (18) com os 06 Parafusos Chipboard 4x16mm (21) nas laterais da gaveta (13) e (17).

Encaixar o Fundo da Gaveta (16) nas canaletas das chapas (13) (14) (15) e (17).

Em seguida, apertar os tambores minifix com a chave philips.

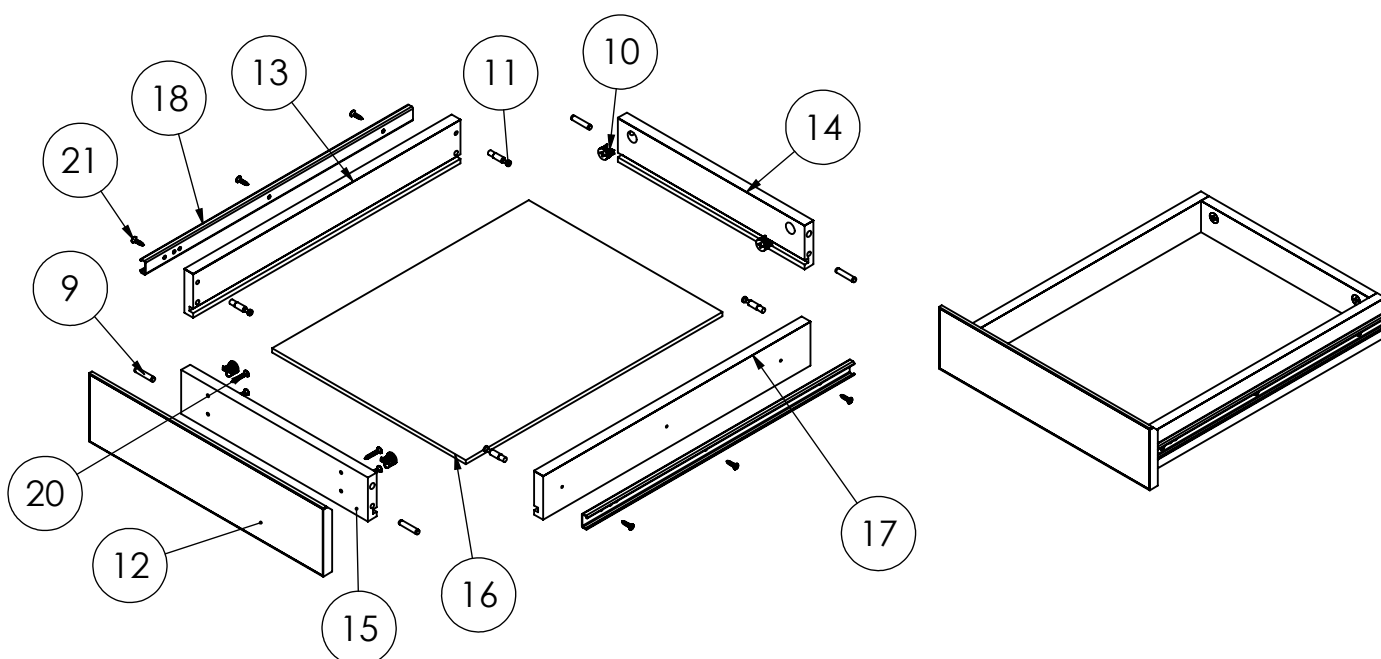

Montagem da Gaveta

Rev: R00 - Data: 04/09/2025

Armário Hospitalar Safe Clip

3º Passo

Inserir correções externas (18) e fixar com os 06 Parafusos Chipboard 4,00 x 16mm (21) e fixar nas laterais internas das chapas (02) e (03) com a parafusadeira.

Fixar na chapa base (1) os 04 tambores de minifix (10) e as 06 cavilhas (9).

Fixar nas chapas laterais (2) e (3) as 06 cavilhas (9), os 10 parafusos minifix (11) e os 04 tambores minifix.


Fixar nas 02 chapas (7) as 04 cavilhas e 04 tambores minifix.

Fixar na chapa (8) os 04 parafusos minifix.

Encaixar fundo (5) nas canaletas situadas em (4) (3) (2) e (1).

Encaixar a canaleta da chapa superior tampo (8) no fundo (5) e nas cavilhas das chapas laterais (2) e (3).

Em seguida, apertar os tambores minifix com a chave philips.

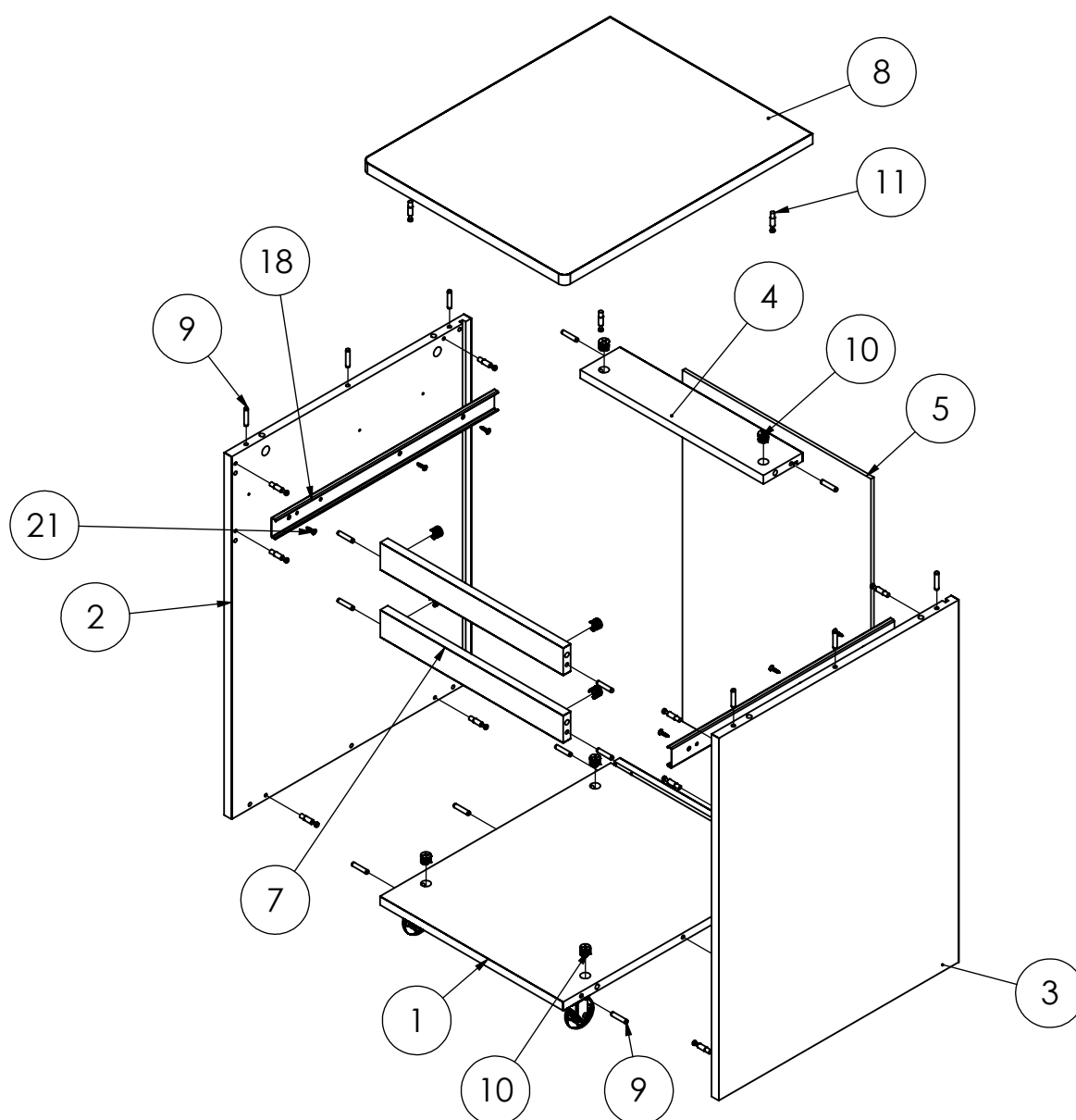


Montagem da Estrutura

Rev: R00 - Data: 04/09/2025

Armário Hospitalar Safe Clip

4° Passo


Inserir a gaveta e verificar se está funcionando corretamente.

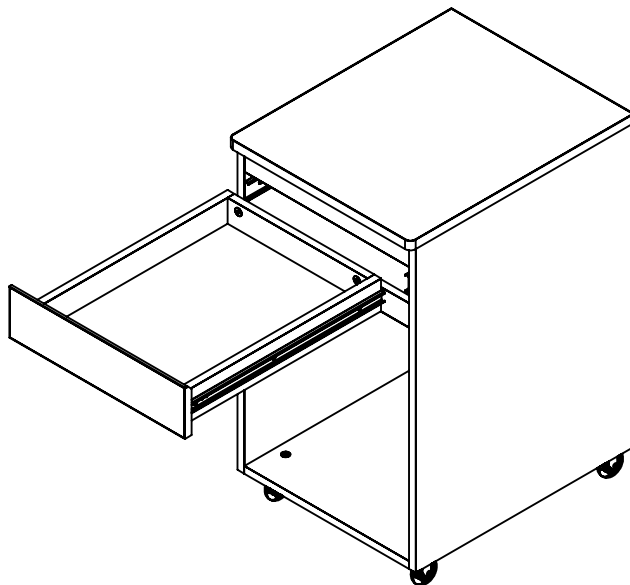

Montagem da gaveta

5° Passo

Instalar dobradiças (22) no alojamento da porta (6) e na lateral do móvel usando os parafusos (21) nos pré-furos.

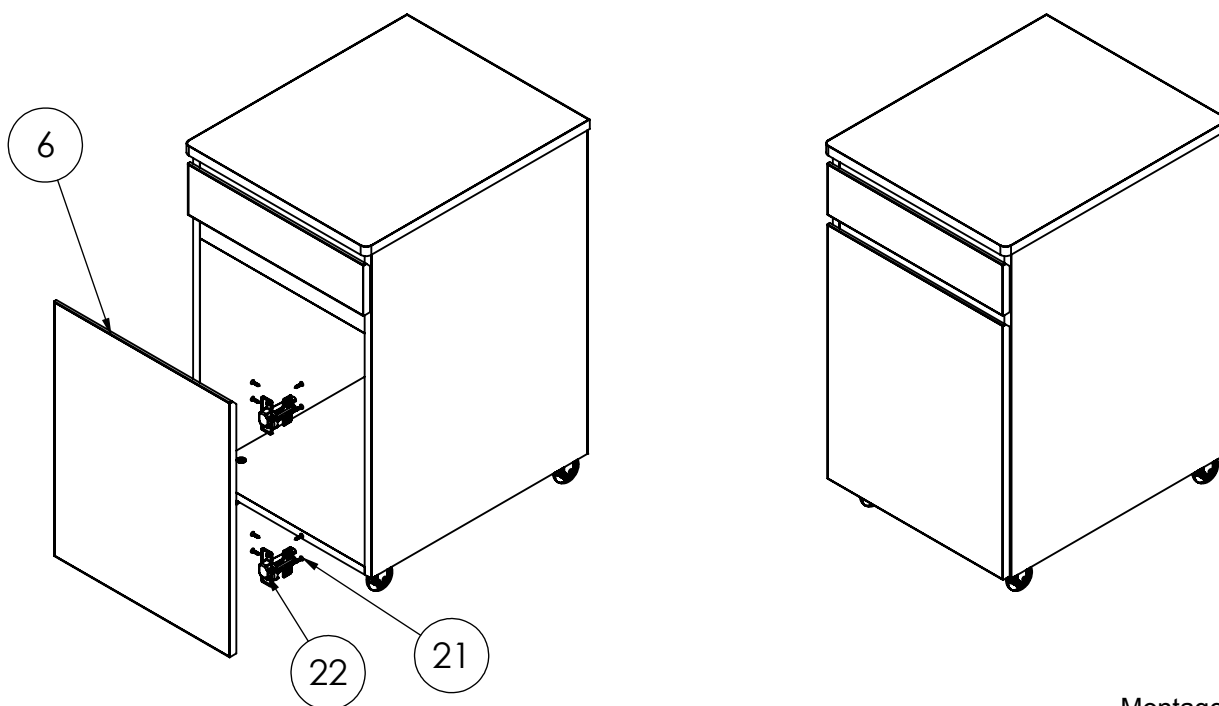

Montagem da porta

Rev: R00 - Data: 04/09/2025

