


Armário Hospitalar Safe




Revisão:R00 - Data:Julho/2026

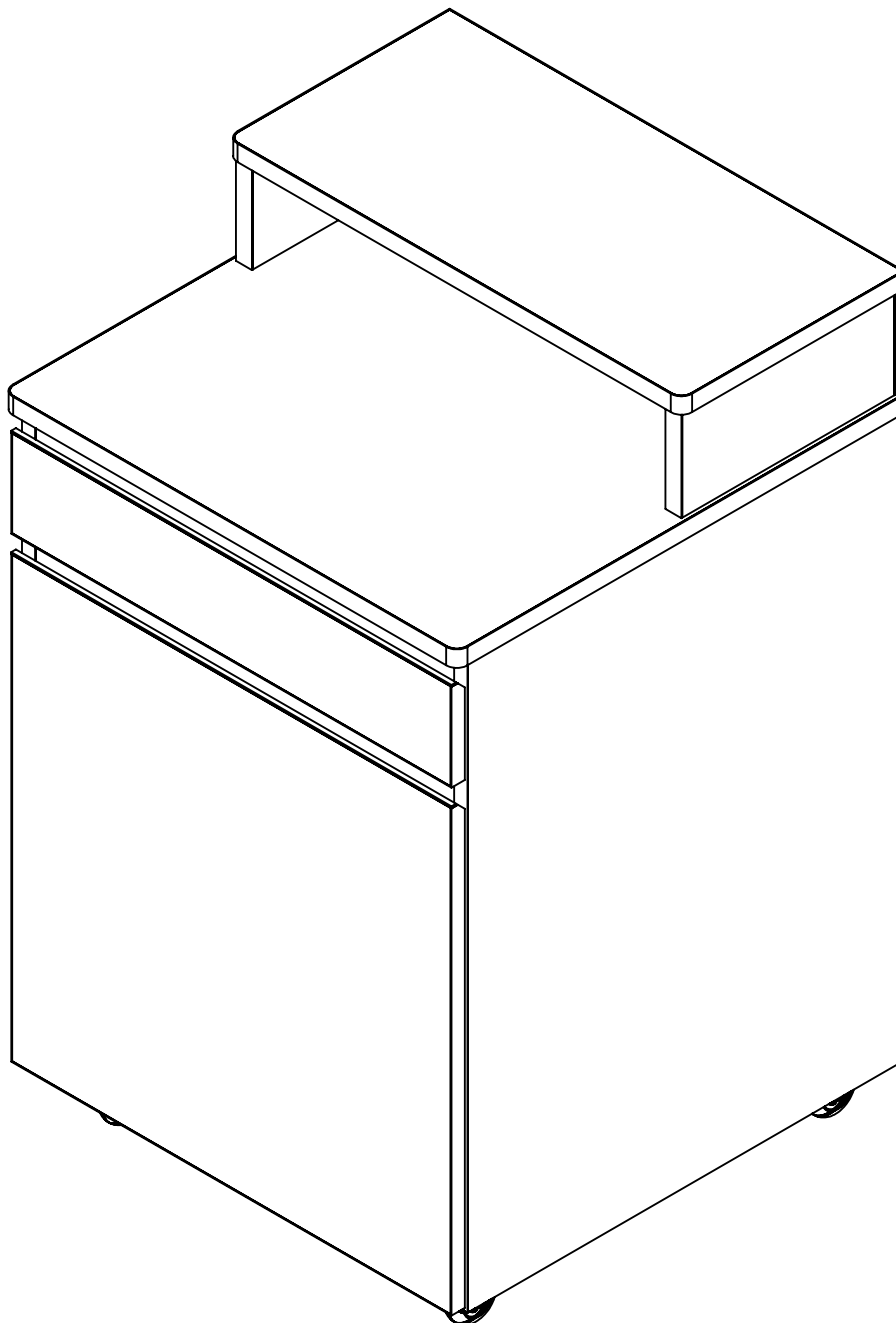

FK Grupo S.A.
Rod. Braz Fortunato KM2, SN
Bariri - SP

www.frisokar.com.br • sac@fkgrupo.com • (14) 3662-9000

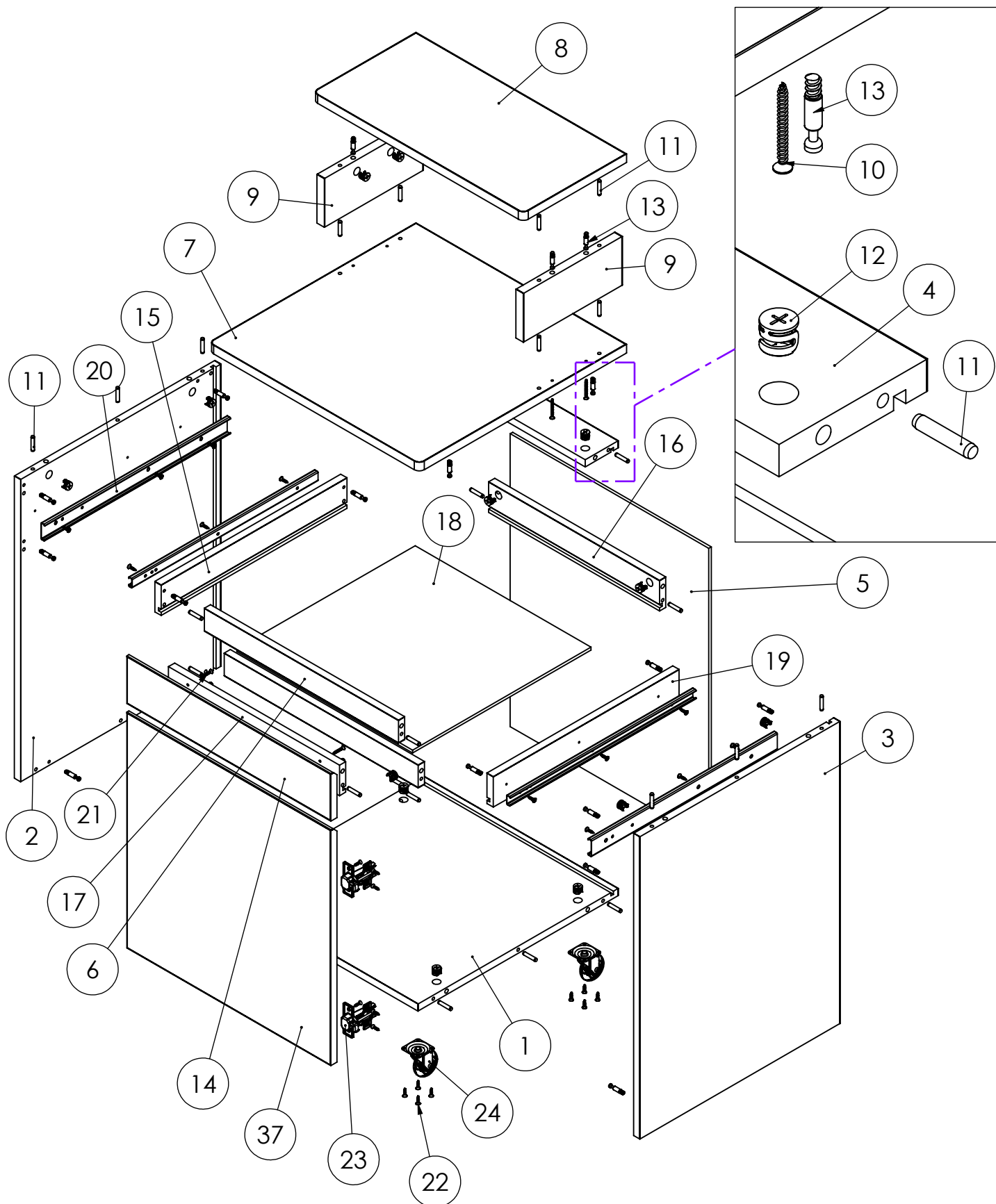

Revisão:R00 - Data:Julho/2026





ITEM		QTD
1	Base inferior	1
2	Lateral Esquerda Armário	1
3	Lateral Direita Armário	1
4	Travessa Superior Traseira	1
5	Fundo Armário	1
6	Travessa frontal superior	2
7	Inferior tampo	1
8	Superior tampo	1
9	Suporte Tampo	2
10	Parafuso Chipboard 4x40mm	4
11	Cavilha	30
12	Tambor Minifix	22
13	Parafuso Minifix	22

ITEM		QTD
14	Frente Gaveta	1
15	Lateral Esquerda Gaveta	1
16	Traseira Gaveta	1
17	Frente Gaveta	1
18	Fundo Gaveta	1
19	Lateral Direita Gaveta	1
20	Corrediça	2
21	Parafuso Chipboard 4x25mm	4
22	Parafuso Chipboard 4x16mm	28
23	Dobradiça	2
24	Rodizio	4
37	Porta	1

Passo 1


Fixar as rodízios (24) na base (1) por meio dos parafusos (22).

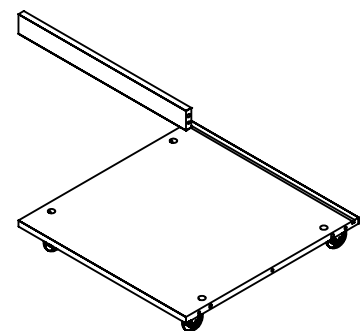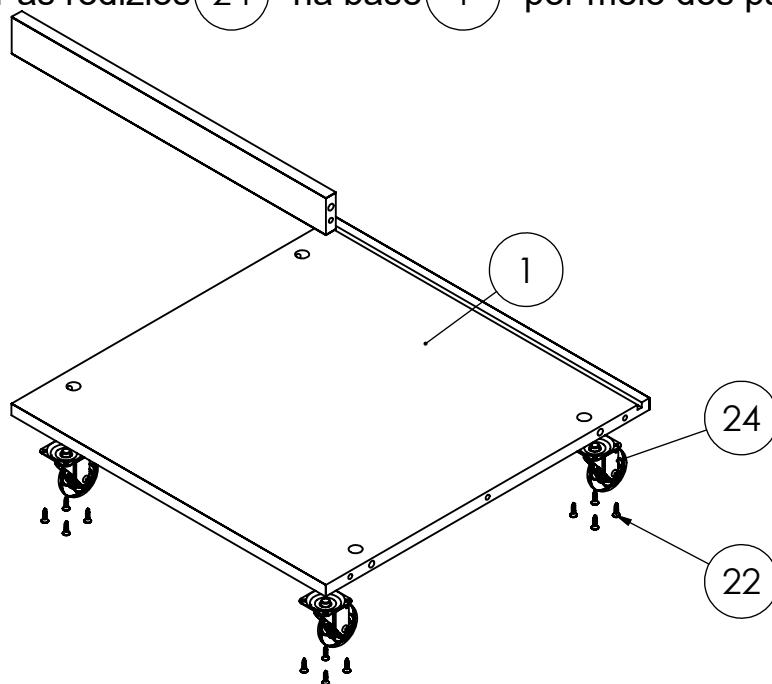

Revisão:R00 - Data:Julho/2026

Passo 2

Fixar 04 parafusos minifix (13) na chapa superior do tampo (8); fixar 02 cavilhas (11) e 02 tambores minifix (13) nas duas chapas suporte do tampo (10); fixar 04 cavilhas, 04 parafusos minifix e 04 parafusos (10) no tampo inferior (7)

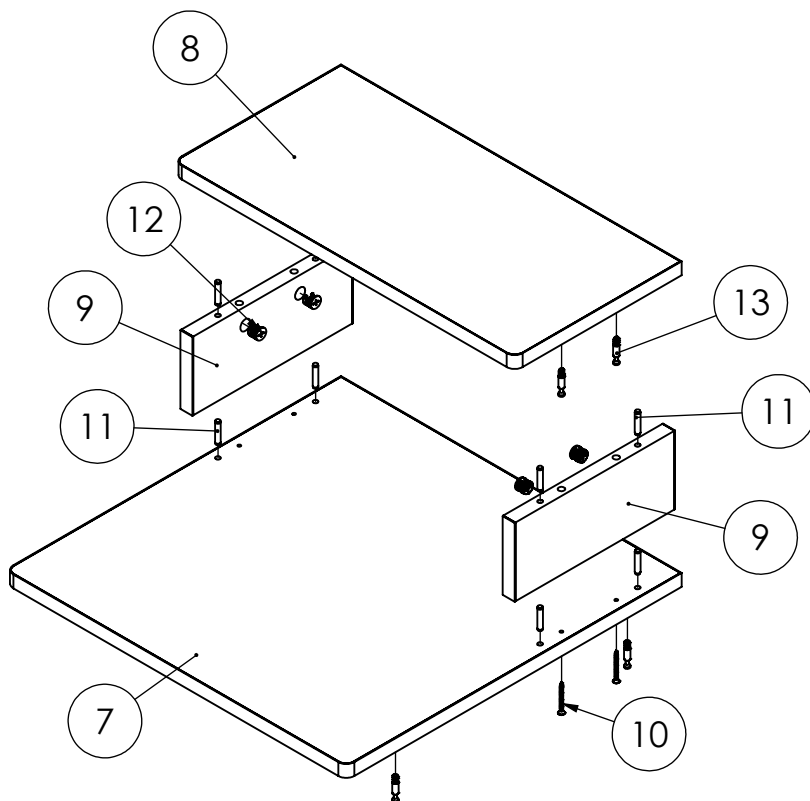

Revisão:R00 - Data:Julho/2026

Passo 3

Fixar na chapa base (1) os 04 tambores de minifix (12) e as 06 cavilhas (11).


Fixar nas chapas laterais (2) e (3) as 06 cavilhas (11), os 05 parafusos minifix (13) e os 02 tambores Minifix.

Fixar na travessa superior (4) as 02 cavilhas e os dois tambores minifix

Fixar nas chapa (6) e (7) as 04 cavilhas e 04 tambores minifix

Encaixar fundo (5) nas canaletas situadas em (4) (3) (1) (2).

Em seguida, apertar os tambores minifix com chave philips conforme ilustração abaixo.

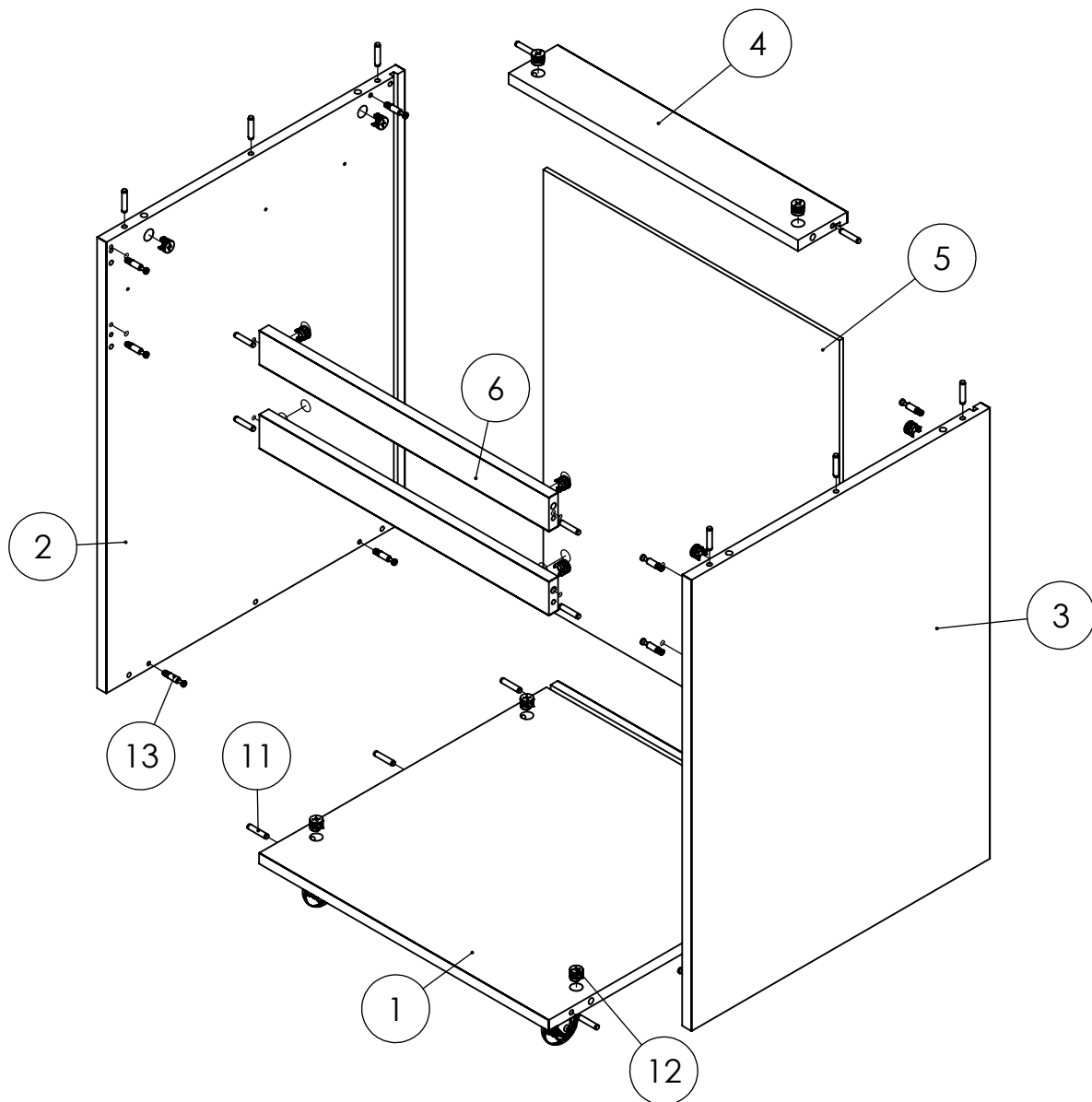

Revisão:R00 - Data:Julho/2026

Passo 4

Fixar na Chapa Lateral (15) e (19) as 04 parafusos minifix (13).


Fixar nas Chapas (17) e (16) 02 cavilhas (11), e 02 tambores minifix (12)

Fixar Chapa (17) a chapa (14) com os 06 parafusos Parafuso Chipboard 4x25mm (21)

Fixar parte gaveta da corrediça (25).

Encaixar (18) nas canaletas das chapas (15) (16) (17) e (19).


Em seguida, apertar os tambores minifix com chave philips conforme ilustração abaixo.

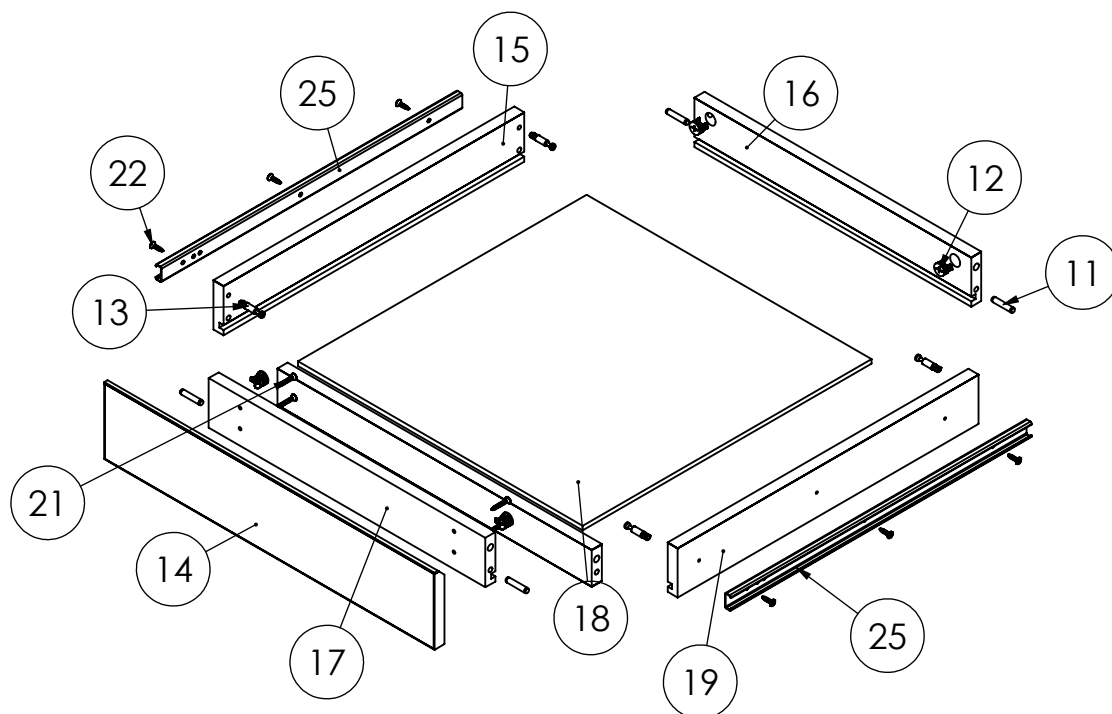


Revisão:R00 - Data:Julho/2026

Passo 5

Inserir parte corredeiras que ficam fixadas nas laterais (20) internas dos móveis e em seguida, inserir a gaveta.

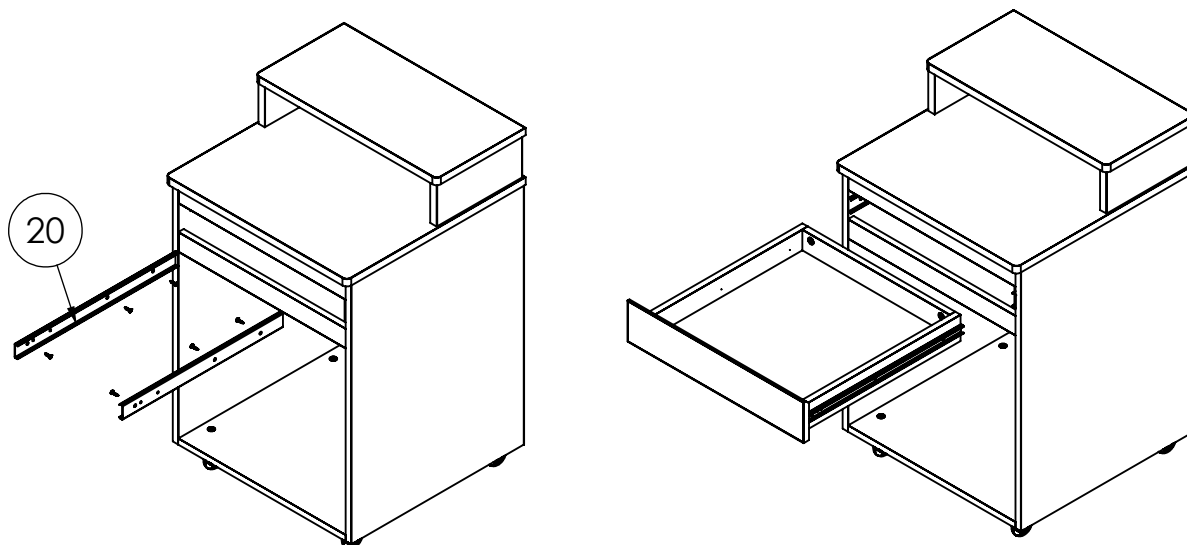**Passo 6**

Instalar dobradiças (24) no alojamento da porta (38) e na lateral do móvel usando os parafusos (23) nos pré-furos.

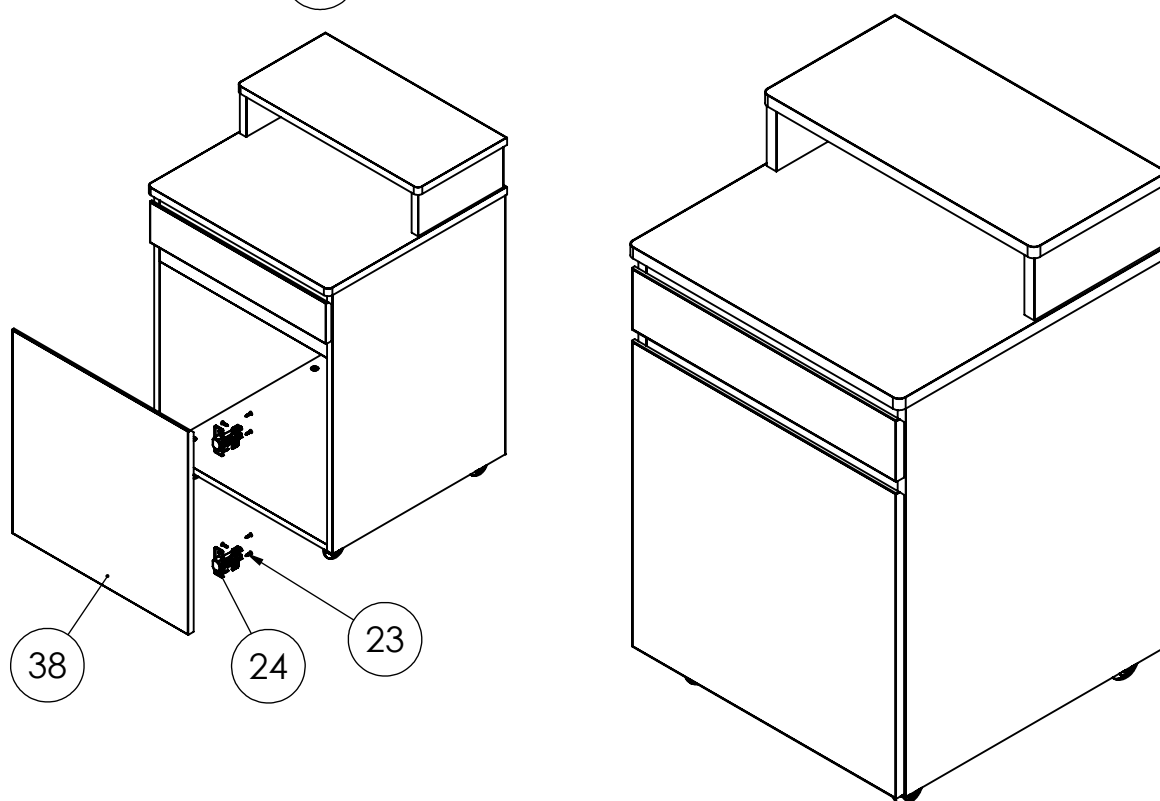

Revisão:R00 - Data:Julho/2026



Revisão:R00 - Data:Julho/2026



FK Grupo S.A.
Rod. Braz Fortunato KM2, SN
Bariri - SP
www.frisokar.com.br • sac@fkgrupo.com • (14) 3662-9000